

# **ceramill**<sup>®</sup> map300

## **EN** Gebrauchsanweisung

Workaround Modellguß

## **EN** Instructions for use

Workaround model cast





**AMANNGIRRBACH**


## Workaround Modellguß - Scan mit Ceramill Map300

### 1. Fall in der Ceramill Karteikarte anlegen

Für den zu versorgenden Kiefer wird die Indikation Aufbisschiene (Bite splint) gewählt und gegebenenfalls für den anderen Kiefer die Indikation Antagonist.

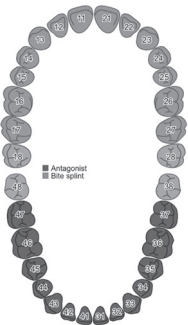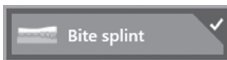


### 2. Scannen der Modelle mit der Ceramill Map Software

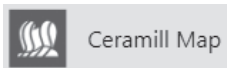

### 3. Modellguß definieren

Nach erfolgreichem Scanprozess wird für die Zähne die Indikation „Modellguß“ (Partial Framework) definiert und der Fall erneut über den „Speichern“-Button abgespeichert.

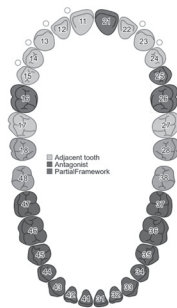



### 4. Platzieren oder Designen

Nun kann gewählt werden, ob die zu ersetzenden Zähne zuerst in der Ceramill Mind platziert werden und somit als Mogup dienen (hierzu wird die Ceramill Mind gestartet) oder ob über den „M-Part“ Button direkt mit dem Design des Modellguß begonnen wird.


## Workaround model cast - scanning with Ceramill Map300

### 1. File the case in the Ceramill records index

The indication Bite Splint is selected for the jaw to be restored and, if applicable, the indication Antagonist for the other jaw.

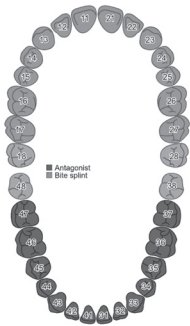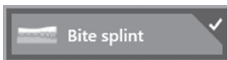


### 2. Scanning the models with the Ceramill Map Software

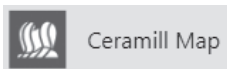

### 3. Define the model cast

After successful scanning, the indication "Model Cast" (Partial Framework) is defined and the case is filed again using the "Save" button.

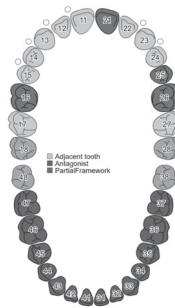

### 4. Placing or designing

Now one can choose whether the teeth to be replaced are first placed in the Ceramill Mind and thus serve as a mock-up (start the Ceramill Mind for this purpose), or if one starts designing the model cast directly via the "M-Part" button.



Manufacturer | Hersteller  
Distribution | Vertrieb

**Amann Girrbach AG**  
Herrschaftswiesen 1  
6842 Koblach | Austria  
Fon +43 5523 62333-105  
Fax +43 5523 62333-5119  
austria@amanngirrbach.com

Distribution | Vertrieb D/A

**Amann Girrbach GmbH**  
Dürrenweg 40  
75177 Pforzheim | Germany  
Fon +49 7231 957-100  
Fax +49 7231 957-159  
germany@amanngirrbach.com  
[www.amanngirrbach.com](http://www.amanngirrbach.com)



Made in the European Union

CE 0123

ISO 13485  
ISO 9001

34500FB 2017/10-09



**AMANNGIRRBACH**